

PRT-20 Entrenador de Reparación Perianal

El entrenador de reparación perianal es un modelo de tejido suave que incluye piel, músculo, esfínter rectal retráctil y mucosa rectal. Es ideal para el entrenamiento de desgarros perianales de primero hasta cuarto grado, incluyendo incisiones medias, medio laterales y laterales. La bandeja soporta el tejido para proveer tensión, esta característica realiza la simulación y crea una marca anatómica ósea al simular la tuberosidad isquiática que permite al usuario realizar un bloqueo pudendal. El tejido reemplazable permite múltiples cortes y suturas realistas de la mucosa vaginal, músculo y capas subcutáneas. La distensión del tejido interno permite un acceso más realista a tejidos más profundos durante las reparaciones de tercer y cuarto grado.

The Perineal Repair Trainer is the only soft tissue model for anatomical and procedural training of first to fourth degree perineal tears. The trainer includes vaginal and anal canals, rectovaginal fascia, skin and muscle layers, a retractable rectal sphincter and rectal mucosa; and allows for midline, mediolateral, and lateral incisions. The replaceable tissue allows for multiple cuts and realistic suturing of the vaginal mucosa, muscle and subcutaneous layers. The tray overlays the tissue providing tension that enhances the simulation and creates a bony anatomical landmark simulating the ischial spine that allows the user to perform a pudendal block. The internal distension rod provides more realistic access to deeper tissues during 3rd and 4th degree repairs.

Desarrollo de habilidades




- Entrenamiento de incisiones medias, medio lateral y lateral
- Retracción del tejido con la mano no dominante
- Inserción de retractor vaginal
- Capas de tejido suturables
 - Realice reparación de desgarres de primero a cuarto grado

Características

- Tejido reemplazable que permite múltiples sitios de incisión y suturas
- Tejido realista con propiedades para reparación de desgarrar de cuarto grado con un esfínter retirable y mucosa rectal
- Tensión ajustable
- Anatomía interna y externa: canal anal y vaginal, mucosa vaginal
- Base para asegurar el modelo

Componentes

- Tejido peritoneal de reemplazo reparable (PRRT-20)
- Vara de tensión
- Base de entrenador de reparación peritoneal

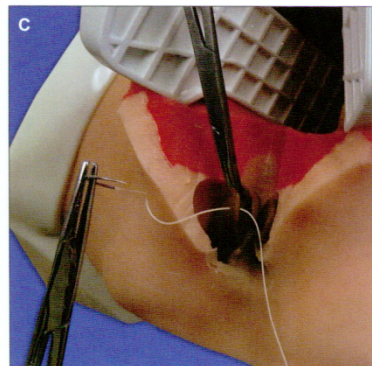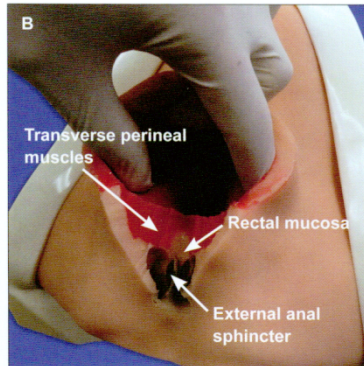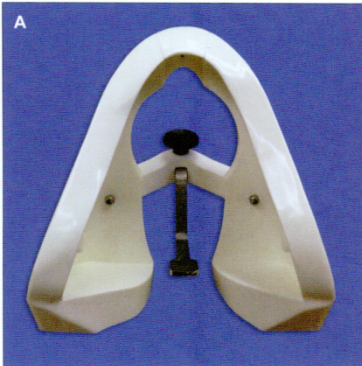

Dimensiones: 22.86 cm x 25.4 cm x 19 cm

Peso: 2.7 Kg

Marca:
(del fabricante)

SIMULAB

Modelo:
(del fabricante)

PRT-20

Procedencia del bien:

Estados Unidos